

VAXOL®

Öronspray / Ørespray / Korvasuihke

SE

Vaxol® är en enkel och effektiv metod för att mjuka upp och avlägsna öronvax på ett naturligt sätt. Minskar behovet av öronpolning och kan underlättar öronpolning när det är nödvändigt. Det är kliniskt visat att olivenolja återfuktar torr hud och därmed minskar klåda och irritation.

Vaxol® kan användas av vuxna och barn över 1 år.

Vaxol® har ett enkelt doseringssystem, som gör det lätt att ge rätt dos in i ytterörat. Vaxol® kan användas sittande eller stående.

Läs denna bipacksedel före användning.

INNAN DU ANVÄNDER EN NY FLASKA VAXOL® SPRAY

Innan du använder Vaxol® spray, värms flaskan i handen och omskakats väl. Spraya 3-4 gånger i luften tills du får en jämn spraystråle (se bild B). Vaxol® är nu klar att använda.

BRUKSANVISNING

- Vaxol® har bäst effekt när den är värmts i handen och omskakats väl före användning.
- Används 1-2 gånger i veckan för att förebygga vaxpropp eller använd Vaxol® enligt läkares/sjuksköterskas föreskrift.
- Om medicinsk öronpolning är nödvändig (vaxpropp), spraya 1-2 doser Vaxol® 2 gånger dagligen i 4-5 dagar, eller enligt ordination, före besöket hos läkares/sjuksköterska.
- Vid klåda och irritation i torra hörselgångar spraya 1-2 gånger i veckan eller enligt ordination.
- Dra försiktigt den övre delen av ytterörat uppåt och bakåt (se bild A).
- Håll flaskan i upprätt ställning med spraymunstycket placerat i yttre hörselgången och tryck ned sprayhuvudet helt 1 eller 2 gånger (se bild B).

NO

Vaxol® er en enkel, effektiv og naturlig måte for å myk gjøre og fjerne ørevoks. Den reduserer behovet for øreskylling, og kan også gjøre øreskylling lettare når det er nødvendig. Det er klinisk bevist at olivenolje gir fuktighet til tørr hud og dermed minsker kløe og irritasjon.

Vaxol® kan benyttes av voksne og barn over 1 år.

Vaxol® har et enkelt og patentert doseringssystem som gjør det lett å dosere den riktige mengden inn i det tyre øret. Vaxol® kan benyttes sittende eller stående.

Les bipakkeddel før bruk.

FØR DU BRUKER EN NY FLASKE VAXOL® ØRESPRAY

Før du tar i bruk Vaxol® ørespray anbefales det at flasken varmes i hånden og ristes godt. Spray 3-4 ganger ut i luften til du får et jevnt trykk (figur B). Vaxol® er nå klar til bruk.

BRUKSANVISNING

- Vaxol® har best effekt når den er blitt varmet i hånden og ristet godt.
- Brukes 1 - 2 ganger i uken for å forebygge vokspropp eller bruk Vaxol® som anvisning fra lege/sykepleier.
- Hvis medisinsk øreskylling er nødvendig (vokspropp), spray 1-2 doser Vaxol® 2 ganger daglig i 4-5 dager, eller som ordinert før besøk hos lege/sykepleier.
- Ved kløe og irritasjon i øregangen spray 1-2 ganger i uken, eller som ordinert av lege/sykepleier.
- Dra forsiktig den øvre delen av det tyre øret opp og bakover (se figur A).
- Hold flasken loddrett med doseringspisen plassert i øregangen. Trykk pumpen ned 1-2 ganger (se figur B).
- Masser forsiktig ved åpning til tyre øregang/tragus (se figur A).
- Gjenta prosedyren i det andre øret ved behov.
- Ikke skyll øret etter sprayning.
- Det hvite spraymunstykket kan ved behov tas av og skylles i varmt vann etter bruk. Sett deretter tilbake munstykket på flasken.

- Massera försiktigt vid öppningen till yttre hörselgången (tragus, se bild A).
- Upprepa, vid behov, proceduren i det andra örat.
- Skölj inte örat efter sprayning.
- Spraymunstycket kan vid behov tas bort och sköljas i varmt vatten efter användning. Sätt deretter tillbaka spraymunstycket på flaskan.

YTTERLIGARE INFORMATION

- Patienter som har perforerad trumhinnan eller ont i öronen ska bara använda Vaxol® efter kontakt med läkare.
- Vaxol® ska inte användas på barn under 1 år utan kontakt med läkare.
- Olivolja är en naturlig produkt med bredd användningsområde. Det finns inga rapporter om biverkningar av Vaxol®, inte heller vid användning tillsammans med andra produkter. Vaxol® ska inte användas om du är överkänslig mot olivenolja.
- Det finns inga kända skadliga biverkningar vid användning av Vaxol® under graviditet eller vid amning. Du bör dock informera din läkare om att du använder Vaxol®.
- Det finns inga kända biverkningar vid överdosering av Vaxol®.
- Vid misstanke om allergisk reaktion, avbryt behandlingen med Vaxol® och kontakta genast läkare.

VARNINGAR


- Vaxol® är endast avsedd för personligt bruk.
- Vaxol® skal alltid förvaras i upprätt ställning vid 15-25°C.
- Vaxol® är hållbar i 6 månader efter att sprayflaskan har öppnats.
- Spraya inte nära öppen eld.
- Förvaras utan syn- och räckhåll för barn.
- Vaxol® är endast avsedd att användas i yttre hörselgången. Spraya inte i närbheten av ögon, näsa eller mun.

YTTERLIGERE INFORMASJON

- Pasienter med perforert trommehinne eller smerter i ørene bør kun bruke Vaxol® etter råd fra lege.
- Vaxol® skal ikke benyttes av barn under 1 år uten samråd fra lege.
- Olivenolje er et naturlig produkt med meget utbredt bruk. Det er ikke rapportert om biverkninger ved bruk av Vaxol® eller om interaksjoner med andre produkter. Vaxol® skal ikke benyttes ved kjent overfølsomhet eller allergi overfor olivenolje.
- Det finnes ingen kjente skadelige biverkninger ved bruk av Vaxol® under graviditet eller amming. Det anbefales at du informerer din lege om at du benytter Vaxol®.
- Det finnes ingen kjente biverkninger ved overdosering av Vaxol®.
- Ved mistanke om en allergisk reaksjon, skal behandlingen avbrytes og lege kontaktes umiddelbart.

ADVARSLER

- Vaxol® er anbefalt for personlig bruk.
- Vaxol® skal alltid oppbevares i loddrett posisjon mellom 15 – 25 °C.
- Vaxol® er holdbar i 6 måneder etter at sprayflaskan er åpnet.
- Spray ikke i nærbheten av åpen ild
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Produktet er kun til bruk i øregangen. Spray ikke i nærbheten av øyne, nese eller munn.

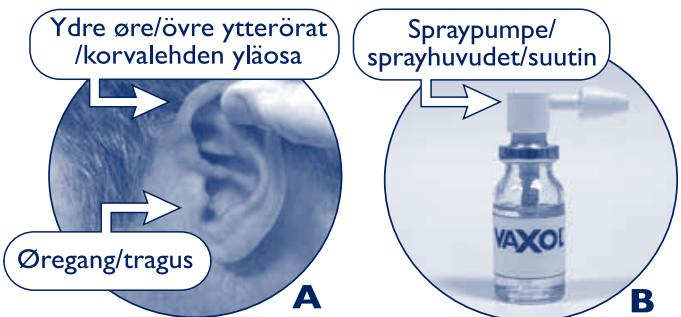



Vaxol® er en nem og effektiv metode til at blødgøre og fjerne ørevoks, helt naturligt. Begränsrer behovet for og gør eventuel øreskylnings lettere.

Det er klinisk bevist, at olivenolie fugter tør hud og derved reducerer kløe og irritation.

Vaxol® kan anvendes af voksne og børn over 1 år.

Vaxol® har et enkelt og patenteret doseringssystem, der gør det let at dosere den korrekte dosis ind i øregangen. Vaxol® skal anvendes, når du sidder eller står.

Læs denne brugsanvisning før brug.

FØR BRUG AF EN NY FLASKE VAXOL® SPRAY

Inden en flaske Vaxol® tages i brug, bør flasken varmes i hånden og omrystes. Spray derefter 3-4 gange ud i luften, indtil du får en jævn spraystråle (se billede B). Vaxol® er nu klar til brug.

BRUGSANVISNING

- Vaxol® er mest effektiv, når flasken er varmet i hånden og omrystet for brug.
- Anvendes 1-2 gange om ugen for at forebygge vokspopper, eller som anvist af lægen / sygeplejersken.
- Hvis medicinsk øreskylning er nødvendigt (voksprop), spray 1-2 doser Vaxol® to gange dagligt i 4-5 dage før besøg hos lægen. Hvis lægen har anvist anden dosering, følges denne.
- Ved kløe og irritation i tørre øregange spray 1-2 gange om ugen. Hvis lægen har anvist anden dosering, følges denne.
- Træk forsigtig det ydre øre opad og bagud (se billede A).
- Hold flasken lodret med dysen placeret i øregangen. Tryk spraypumpen i bund 1-2 gange (se billede B).



Vaxol® on yksinkertainen ja tehokas tuote, jonka avulla korvavaha pehmenee ja poistuu luonnollisesti. Tämä vähentää tarvetta korvahuuheluihin ja helpottaa korvahuuheltaa, silloin kun sellainen on tehtävä. On kliinisesti todistettu, että oliiviöljy kosteuttaa kuivaa ihoa ja siten vähentää kutinaa ja ihoärsytystä.

Vaxolia® voivat käyttää aikuiset ja yli 1-vuotiaat lapset. Vaxolissa® on ainutlaatuinen annostelupumppu, jonka avulla on helppo annostella juuri oikea määrä tuotetta ulkokorvaan. Vaxolin® annostelu korvaan tapahtuu joko seisten tai istuen.

Lukekaa tämä pakkausseloste ennen käyttöä.

ENNEN KUIN ALOITAT VAXOLIN® KÄYTÖN

Lämmitä pulloa kämmenellä ja ravista hyvin. Paina pumpua kolmesta neljään kertaan kunnes suihku toimii (katso kuva B). Muista osoittaa sumutin poispäin itsestäsi.

KÄYTTÖOHJEET

- Vaxol® toimii tehokkaimmin, kun pulloa on lämmitetty kämmenellä ja ravistettu hyvin ennen käyttöä.
- Estääksesi korvahanan muodostumista käytä Vaxolia® kerrasta kahteen viikossa tai hoitohenkilötä saamasi ohjeistuksen mukaan.
- Valmistautuessasi korvahuuhelun annoste Vaxolia® 1-2 kertaa kahdesti päivässä 4-5 päivän ajan ennen korvahuuheltaa, tai hoitohenkilön ohjeen mukaan.
- Kuivan korvakäytävän kutinaa ja ihoärsytystä hoitaessasi annoste Vaxolia® 1-2 kertaa viikossa, tai hoitohenkilön ohjeen mukaan.
- Vedä korvan yläosaa kevyesti ylös- ja taaksepäin (katso kuva A).
- Pidä pulloa pystyasennossa ja aseta suuttimen pää korvakäytävään. Paina pumpu pohjaan 1-2 kertaa (katso kuva B).

Konsumentkontakt:

SE: Farmacia Nordic AB, www.farmacianordic.com

Bipacksedeln är reviderad 01-2022.

Vaxol® är en medicinteknisk produkt klass I som uppfyller EU-direktiv 93/42/CEE.

www.vaxol.se

Forbrukerkontakt:

NO: Farmacia Nordic AB, www.farmacianordic.com

Pakningsvedlegget er revidert 01-2022.

Vaxol® er et medisinsk teknisk produkt, klasse I som oppfyller EU-direktiv 93/42/CEE.

www.vaxol.no

HL Healthcare Ltd., Pure Offices, Plato Close, Tachbrook Business Park, Warwick CV34 6WE, United Kingdom.

Importeras och distribueras av:

Farmacia Nordic AB
c/o Convendum, Gåvlegatan 16, 102 31 Stockholm

- Massér forsigtigt på åbningen til øregangen (se billede A).
- Gentag, efter behov, samme produdere i det andet øre.
- Skyl ikke øret efter sprayning.
- Det hvide sprayhoved kan ved behov aftages og skyldes i varmt vand efter brug. Sæt derefter sprayhovedet tilbage på flasken.

YDERLIGERE INFORMATION

- Patienter med perforeret trommehinde eller ørepine bør kun bruge Vaxol® efter aftale med læge.
- Vaxol® bør kun anvendes til børn under 1 år efter aftale med læge.
- Olivenolie er et naturligt produkt med meget udbredt brug. Der er ikke rapporteret om bivirkninger ved brug af Vaxol® eller interaktioner med andre produkter. Dog bør produktet ikke anvendes, hvis man har en kendt overfølsomhed eller allergi over for olivenolie.
- Der er ingen kendte skadelige bivirkninger ved at bruge Vaxol® i graviditeten og/eller ved amning. Det anbefales dog at informere lægen om, at du anvender Vaxol®.
- Der er ingen kendte bivirkninger ved at overdosere Vaxol®.
- Hvis der er mistanke om en allergisk reaktion, bør brugen af Vaxol® stoppes og lægen informeres.

ADVARSLER

- Vaxol® er kun beregnet til personlig brug.
- Vaxol® skal opbevares i lodret position ved en temperatur mellem 15 og 25 °C.
- Vaxol® er holdbar i 6 måneder efter sprayflasken er taget i brug.
- Spray ikke i nærheden af åben ild.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Produktet er kun til brug i øregangen. Spray ikke i nærheden af øjne, næse eller mund.

- Hiero kevyesti tragusta (korvalehdien etuosassa oleva nipukka, katso kuva A).
- Toista käsittely tarvittaessa toiselle korvalle.
- Älä huuhdo korvaa käsittelyn jälkeen.
- Suuttimen kärki on hyvä irrottaa ja huuhdella kuumalla vedellä käytön jälkeen ja asettaa takaisin paikalleen.

LISÄTIETOJA

- Käytä Vaxolia® vain lääkärin valvonnassa, jos kärsit korvakivusta tai korvan tärykalvo on puhjennut.
- Vaxolia® ei saa käyttää alle vuoden ikäisten lasten korviin ilman lääkärin neuvoa.
- Oliiviöljy on laajalti käytetty luonnontuote. Tuotteen tai sen käyttämisen yhdessä lääkkeiden kanssa ei ole raportoitu aiheuttavan sivuvaikutuksia. Tuotetta ei pidä käyttää, jos olet yliherkkä oliiviöljylle.
- Jos tuote aiheuttaa allergiaoireita, tulee sen käyttö lopettaa ja ottaa yhteyttä lääkäriin välittömästi.
- Tuotteella ei ole tunneta haitallisia sivuvaikutuksia raskauden tai rintaruoikinnan aikana käytettynä. Kerro tuotteen käytöstä kuitenkin lääkärille.
- Tuotteen yliannostelulla ei ole tunneta haitallisia sivuvaikutuksia.

VAROITUKSET

- Vaxol® -pullo on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön.
- Vaxol® tulee säilyttää pystyasennossa 15-25 °C:n lämpötilassa.
- Tuote tulee käyttää kuuden kuukauden kullessa avaamisesta.
- Tuotetta ei saa suihkuttaa avotuleen.
- Tuote on pidettävä poissa lasten näkyviltä ja ulottuvilta.
- Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan korvakäytään. Älä suihkuta tuotetta lähellä silmiä, nenää tai suuta.

Forbrugerkontakt:

DK: Farmacia Nordic AB, www.farmacianordic.com

Indlægssedlen er revideret 01-2022.

Vaxol® er et medicinskt-teknisk produkt, klasse I, i henhold til EU-direktiv nr. 93/42/CEE.

www.vaxol.dk

Yhteystiedot kuluttajille:

FI: Sabora Pharma Oy, www.saborapharma.fi

Tämä ohje on tarkastettu 01-2022.

Vaxol® on eurooppalaisen direktiivin 93/42/CEE täytävä luokkaan I kuuluvia terveydenhuollon laite.

www.vaxol.fi

EC REP Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta